



小腰艾臣iCARE
Massage Pillow



User Manual 使用手册

Ogawa is grateful
to have received
these awards:



Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Indonesia . Australia . China . Vietnam . Myanmar . Saudi Arabia

制造商: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

[Http://www.easepal.com.cn](http://www.easepal.com.cn)



Spring of wellness.

OG-2101 iCare 小腰姬

感谢您购买奥佳华小腰姬按摩靠垫，使用前请仔细阅读操作手册，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

目 录

安全指引

保修权限

产品零件及配件

产品特性及使用示意

操作方式及功能说明

产品规格

故障排除

产品保养

安全指引

a) 重要安全事项说明

- 为确保安全及正确使用产品，使用前请务必详细参阅操作手册。
- 请务必依照本操作手册内的产品用途使用本产品。
- 使用完毕后或清洁产品前，请将电源插头从插座中拔除。
- 请务必谨慎使用温热功能，以避免可能会导致严重灼伤。
请勿用于感觉迟钝和过于敏感的皮肤或血液循环不良的部位。
切勿让儿童或者身心功能障碍者自行使用温热功能，以免操作不当可能存在危险。
- 为避免因过热而导致走火、触电、或造成伤害，请勿将产品置于枕头或毯子等散热不好的环境下操作。
- 请勿覆盖使用，以免造成马达温度过高而导致故障或损坏。
- 若产品使用或接近儿童，身心功能障碍与伤残者，需要有旁人指导且能负责其安全。
- 如在按摩进行中感到不适，请立即停止按摩。
- 下列状况发生时，切勿使用本产品：电源线或电源插头损坏、操作不正常、曾掉落地面或者损伤，曾落入水中，请联系维修服务中心进行检查和维修。
- 请勿使用非制造商所推荐的零配件。
- 请勿将物品插入或者掉落产品的任何开口中。
- 若想切断电源，请将所有的操作控制关闭后，再将电源插头由插座中拔除。
- 本产品不能作为自我诊断或治疗之用，如需要诊断或治疗，应由专业医疗人员处理。

安全指引

b) 使用环境

- 请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品，以免产品发生故障。
- 请勿在室温高于40℃的环境下使用本产品。
- 请勿将产品放置户外。
- 请勿将产品置放于电热器旁、炉具附近或者阳光直射处。

c) 使用注意

- 按摩过程中如有不适，请立即停止使用。
- 医生叮嘱禁止按摩的人请勿使用，以免导致事故或身体不适如血栓(栓塞)病症;重度动脉瘤;急性静脉瘤;各种皮肤炎;皮肤感染病症(含皮下组织炎症)等。
- 绝对不能与以下医疗电子仪器一起使用：
 - (1) 心脏起搏器等植入式医疗电子仪器
 - (2) 人工心脏等用来维持生命的医疗电子仪器
 - (3) 心电图机等佩戴式医疗电子仪器否则可能会导致上述医疗电子仪器产生误动作，可能会危及生命。

d) 开关注意事项

- 切勿用湿手操作控制开关。
- 切勿让控制开关接触水等液体。

安全指引

e) 使用电源插头及电源线须知

- 请勿用潮湿的双手安插或者拔除电源插头，以免触电或者导致机件故障。
- 拔出电源插头时，请握住插头本身，切勿拉扯电线。
- 虽然15分钟自动定时功能会自动停止产品操作，仍请每次使用完毕后，务必将主电源切断。
- 电源线务必和加热表面保持安全距离。
- 请勿将电源线置于产品或任何重物之下。
- 请勿将电源线缠绕于产品上，以免电源线受损而导致触电或者电线走火。
- 当电源线或者电源插头损坏时，切勿继续使用产品。
- 电源插座有松动的状况时，请勿使用产品。
- 请勿用电源线移动产品，或将电源线当握把使用。
- 当电源线损坏时，必须由服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

安全指引

注意


- 在按摩颈部期间，按摩头要贴近颈部两侧，否则可能会引起疼痛。
- 请勿在产品操作时入睡。
- 请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- 请勿直接将按摩头贴近手部、肘关节、膝盖、胸部或腹部。
- 连续使用本产品时间请勿超过三十分钟。
- 若产品的布套已经破损，请勿使用。
- 请勿在进食前后一小时使用，以免造成反效果。
- 在偏低室温中使用产品时，切勿骤然使用温热功能，建议将温度逐渐调至正常范围后再使用。
- 若是将产品由低温储存处移至温暖环境使用时，可能会因为机件内水汽聚集而影响产品正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后，先将产品在正常室温放置1小时后再开始使用。
- 使用中察觉任何机件故障或不正常状况，请立即停止使用。
- 若在使用中发生电流中断的状况，应注意避免因电力突然恢复而造成使用者受伤。
- 雷电情形发生时，不宜使用本产品。

保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本产品有效保修期为一年。
3. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修（外表不在保修范围内）。
4. 当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
7. 以下情形不属于保修范围，只提供有偿维修服务（收取人工费和材料费）
 - (a) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用和保管，使用不当引起的损坏等；
 - (b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
 - (c) 购买后因自行不良运输造成的损坏；
 - (d) 因其他不可抗力因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）造成的损坏。

产品零件及配件

主体

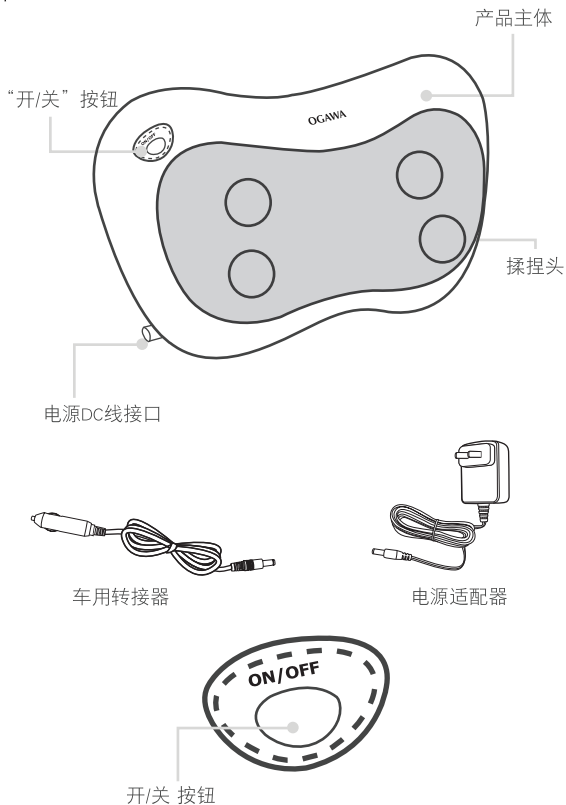

产品特性及使用示意

产品特性

- 多用途按摩器，适用于身体各部位，特别是颈部、肩部及腰部
- 4个平滑按摩头，1分钟自动正反转，温柔贴身揉捏，疏压更全面
- 温热功能可帮助舒缓和放松，提升按摩功效
- 使用方便，一个按钮提供简易操作
- 轻巧且携带方便
- 使用15分钟后，电源自动关闭
- 同时配备车用转接器，方便车用

使用示意

腰部



腿部



颈肩部



操作方式及功能说明

a) 使用前准备

- 检查产品有无破损。
- 将产品放置于想要按摩的身体部位，并且确定摆放位置安稳舒适。



b) 使用方法

1. 将电源适配器的DC头接入产品的DC线接口，另一端插入220V/50Hz的电源插座上。
2. 操作方法
 - 按ON/OFF开关按钮一次，开启按摩及加热功能，此时按摩球转动，并显示为黄色。
 - 按ON/OFF开关按钮第二次，开启按摩功能，加热功能关闭，此时仅按摩球转动。
 - 长按ON/OFF开关按钮2秒，关闭所有功能。
3. 车用时，将车用转接器的DC头，接入产品的DC线接口，另一端插入点烟器，操作方法同上。

产品规格

产品名称	小腰姬按摩靠垫
产品型号	OG-2101
额定电压	12V==2A
额定功率	24W
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
定时时间	15分钟

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	解决方法
无法开机	1.未通电 2.开/关按钮未开启	1.接入电源或检查电源是否连接良好 2.开启开/关按钮
突然停止操作	1.断电 2.按摩时间超过15分钟 3.连续使用时间过长，产品过热保护 4.施力过大，按摩球堵转	1.检查电源接口是否接好 2.重新开启开/关按钮 3.产品冷却后重新开启开/关按钮 4.重新启动开/关按钮

产品保养

a) 贮藏

- 不使用时，请将产品放入彩盒中，并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- 切勿拧曲开关电源及电线。
- 切勿使用开关电源及电线悬挂产品。
- 避免尖状物刮破产品表面。
- 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

b) 清洁

- 清洁之前，确认总电源开关已关闭，并拔出电源插头。
- 请使用干布清洁产品表面。

注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁产品。

c) 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

联络我们

奥佳华OGAWA

厦门蒙发利营销有限公司

地址：厦门市思明区前埔路168号

邮编：361008

服务热线：400-885-9880

华东区域咨询电话：021-62120981

地址：上海市长宁区延安西路1023号大众金融大厦B栋2903室

华北区域咨询电话：010-58670435

地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心B座607室

华南区域咨询电话：0755-83864515

地址：深圳市福田区中心区卓越大厦411室

奥佳华中国官网：www.ogawaworld.net.cn

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP

地址：厦门市思明区前埔路168号

邮编：361008

总机：86-592-3795700

传真：86-592-5532788

官方网站：<http://www.easepal.com.cn>